

# 給・排水機能付き歯ブラシ・スリムヘッドe-Brush II の使用法

## e-Brush II セット

スリムヘッドe-Brush II + 給水チューブ + 20mlシリンジ

ブラシ硬さ S (ソフト)標準 (やさしい感覚で最適)

M (やや硬め)

SS (ウルトラソフト)(無菌顎、口腔内刷掃・洗浄)

## その他の取り扱い付属品

アーガイル・コネクティングチューブ(吸引器接続用)  
アーガイル・ヤンカー・サクシオンチューブ(喀痰吸引用)  
固形物吸引管(往診時の歯科治療にも使用可)  
各種コネクター(調整用アダプター)  
歯ブラシホルダー

## 吸引器

お手持ちの吸引器がある場合はそのまま使用できます。  
病院用セントラル吸引器  
ポータブル吸引器(YM2000T, ケアクリニック簡易吸引器など)  
歯科用ユニットバキューム その他

## 洗浄水

水道水、ポビドンヨード、うがい薬など  
各種洗浄液はあらかじめ複数のシリンジに用意し、シリンジを  
交換することで使用すると能率的です。

入院、在宅の口腔ケアを楽しくする  
うがいのいらない

## スリムヘッドe-Brush II の特性

1. 化学的洗浄と機械的清掃が同時に可能
2. 目的部位へのDrug deliveryと回収ができ衛生的
3. 洗浄機能により歯垢、舌苔などを湿潤、溶解
4. 洗浄による清涼感があり爽快
5. 吸引・排水機能により口腔内に水が貯留せず安全
6. 口腔内汚物の排出が容易で誤嚥がない
7. うがいせずに汚れの確認ができ、能率的
8. スリムヘッドで操作性がよく、短時間の歯磨きが可能
9. 洗浄液の選択や液温の調整が容易
10. 冷水使用で口腔冷刺激ができ嚥下機能を促進
11. 体位変換不要 (顔の横向きで安全性はさらに向上)
12. 安価 (お見舞い用・最適品)

## スリムヘッドe-Brush II の組み立て


1. 給水チューブを給水用金属管に接続、もう一方を洗浄液を入れた20ml用シリンジに接続します。

### 注意事項

- 給水チューブと金属管の接合は3~5mmとし、接続後は、はずさずに接続したままご使用ください。  
はずす時はチューブを引っ張らず、接合部分でチューブを切断し、残ったチューブはメスなどで切り取ってください。  
無理に引っ張ると給水用金属管がずれ、給水できないことがあります。
2. e-Brush II 吸引用パイプに吸引器用コネクティングチューブを接続し、吸引器のスイッチをONに入れば、すぐに使用できます。

## 使用法

1. 左手は手のひらにシリンジのピストンヘッドを上逆さまに保持し、小指、薬指、中指でシリンダー部を保持、人さし指を伸ばし口唇を開き、拇指でピストンを押し洗浄水の量をコントロールします。(下左図参照)
2. 右手はe-Brush II をパームグリップかペンシルグリップで刷掃します。磨き方はスクラッピングまたはフォーンズ法など自由です。(下右図参照)

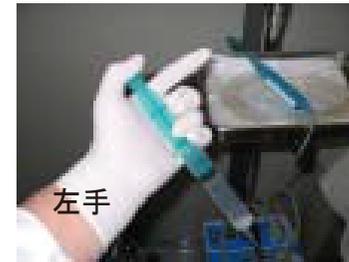

## 使用後の手入れ

容器に入れた洗浄水にe-Brush II ヘッドをつけ吸引しながら振り洗いし、洗浄後はタオルなどで拭き乾燥させてください。  
給水チューブ内の水を抜きたい時は、シリンジで空気を送り抜きます。  
歯ブラシの排水管内が詰まった場合は、水を入れたシリンジを尾部の歯ブラシ排水管に差しこみ、圧をかけて洗浄してください。

### e-Brush II の消毒について

個人専用使用では水洗浄ですが、再使用の場合は理想的にはEOGガス滅菌、簡易法では消毒薬や酸化水に浸漬し、水洗後に乾燥してください。

講道館ビル歯科・口腔外科 メデックe-Brush事業部

〒112-0003 東京都文京区春日1-16-30講道館ビル7階

TEL/FAX: 045-662-2296 (横浜営業所)

ご質問は e-mail: [e-brush@f7.dion.ne.jp](mailto:e-brush@f7.dion.ne.jp) でお受け致します。